


## Pack Essentiel DAE : Défibrillateur Schiller Fred PA-1 + Signalétique DAE

Référence : G3580015

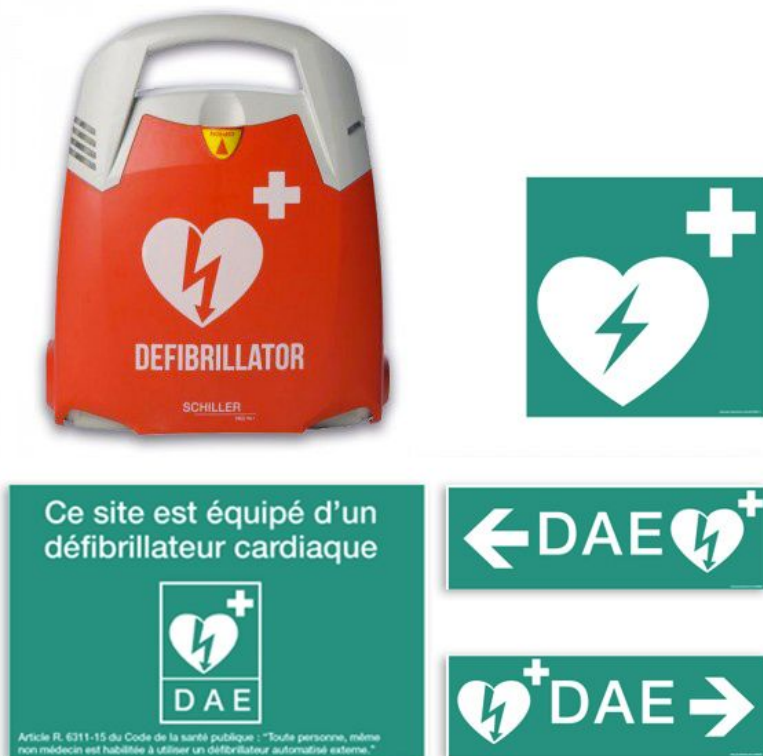

### DESCRIPTION :

**Pack Essentiel DAE avec le Défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique et la Signalétique DAE**

Ce pack contient le nécessaire à avoir pour équiper votre ERP d'un défibrillateur selon la loi.

### INFORMATION PRODUIT

Le Pack Essentiel contient un défibrillateur automatisé externe ainsi que de la signalétique.

Il vous assure d'avoir l'équipement nécessaire à la mise en place d'un défibrillateur dans un ERP.

#### Ce que contient le pack :

- Défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique. Référence : G3580004.
- Panneau pictogramme Premiers Secours DAE en vinyle souple - 125 x 125 mm. Référence : A3180011
- Signalétique A3 DAE PVC - 420 x 280 mm. Référence : A3380052
- Signalétique Flèche Droite DAE Vinyle - 300 x 100 mm. Référence : A3380036
- Signalétique Flèche Gauche DAE Vinyle - 300 x 100 mm. Référence : A3380040

### Le défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique :

Notre **défibrillateur FRED PA-1 Automatique** DEA guide pas à pas lors de l'intervention, grâce à des pictogrammes et des instructions vocales et visuelles. Il est **utilisable sur les adultes comme sur les enfants**. Il adapte ainsi sa puissance en fonction des électrodes qui lui sont connectés.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Le **FRED PA-1 Automatique** effectue des **auto-tests hebdomadaires** et possède des indications explicites lorsqu'une vérification du matériel est requise. Il **aide à la réanimation grâce à un métronome** et des instructions quant au positionnement et au rythme du massage cardiaque.

**Compact et ultra léger**, il est **facile à transporter** et a une **forte résistance à la poussière et à l'eau (IP 55)**. Il est **conforme à toutes les directives européennes** en matière de DAE et peut-être utilisé partout grâce à sa fonction tri-langues.

Fonctionnant de manière **automatique**, il suffit de **fixer les électrodes sur le patient** puis d'**allumer l'appareil**. Il effectue l'analyse du rythme cardiaque du patient et détermine si un choc doit être administré ou non. Le **choc se déclenche automatiquement**, sans intervention humaine contrairement à un défibrillateur semi-automatique.

### Contenu du défibrillateur FRED PA-1

- 1 jeu d'électrodes collables adultes pré-connectées avec tag RFID
- 1 pile LiMnO<sub>2</sub>
- 1 notice d'utilisation en français

### Caractéristiques

- **Poids** : 2,3 kg
- **Dimensions** : 300 x 255 x 110 mm
- **Durée de vie des piles et électrodes** : 6 ans sans utilisation
- Onde de choc biphasique :
  - Adulte : 150/200/200 joules
  - Enfant : 50/50/50 joules
- Allumage instantané dès l'ouverture du capot
- Adaptation automatique à la morphologie de chaque patient
- **Fabrication 100% française**
- **Indice de Protection : IP55** : Projection d'eau et de poussière
- **Normes** :
  - CEI 60601-1
  - 60601-1-2 (CEM)-60601-4
  - 60529
  - CEI 60601-2-4
  - CEI 60529
- **Classe de protection** : IIB selon CEE 93/42



### Ce que dit la loi *Décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes*

Suite au [décret du 19 décembre 2018 sur les DAE](#), les défibrillateurs automatisés externes sont **obligatoires** pour les établissements recevant du public suivants :

- Les ERP de **catégories 1 à 4**,
- Les ERP de **catégorie 5** suivants : structures d'accueil pour personnes âgées, structures d'accueil pour personnes handicapées, établissements de soins, gares, hôtels-restaurants d'altitude, refuges de montagne, établissements sportifs clos et couverts et salles polyvalentes sportives.

Suivant la catégorie de l'ERP, la date d'application de cette nouvelle obligation n'est pas la même :

- **1er janvier 2020** pour les ERP de catégories 1 à 3,
- **1er janvier 2021** pour les ERP de catégorie 4,
- **1er janvier 2022** pour les ERP de catégorie 5.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Notre page dédiée vous renseigne sur [vos obligations concernant les défibrillateurs automatisés externes](#).

Ces panneaux répondent à l'**arrêté du 29 octobre 2019** relatif à la conformité des panneaux défibrillateurs automatisés externes. Leurs dimensions ainsi que leurs couleurs respectent les **dispositions graphiques demandées**.



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)